

IMPIANTO CONICO

SPIRA LARGA

TIPOLOGIA Il design dell'impianto è stato progettato appositamente per una ottimale stabilità primaria in osso soffice. Il corpo centrale unico per tutti i diametri, facilita la preparazione del sito effettuando una piccola osteotomia.

CHIRURGIA I chirurghi, semplicemente, effettuano l'osteotomia fino alla profondità desiderata e successivamente posizionano l'impianto scegliendo il diametro adatto in base alla densità ossea.

AVANZATA Studiati sia per l'inserimento con tecnica a lembo che flapless, sono indicati per il carico immediato anche post-estrattivo purchè la fixture abbia un'ottima stabilità primaria, una lunghezza minima di 11 mm e delle corticali laterali di buone dimensioni.

1 PLATFORM SWITCHING

- Preservazione dello spazio biologico
- Utilizzo del contorno gengivale contro l'infiltrazione
- Mantenimento del livello osseo
- Unica connessione protesica ad esagono interno platform Normal per tutti i diametri

2 COLLO MACCHINATO

- Tessuti molli sostenuti per una migliore estetica

3 MICROFILETTO SUL COLLO

- Ancoraggio stabile con osso corticale
- Massima distribuzione dei carichi preservando la cresta ossea

4 CORPO CONICO

- Simil radicolare

5 MICROFILETTO SUL CORPO

- Per aumentare la superficie di contatto con l'osso BIC

6 MACROFILETTO SUL CORPO

- Per l'ingaggio osseo spugnoso

7 DOPPIA INCISIONE DI SCARICO


- Garantisce il deflusso del coagulo

8 APICE RIDOTTO

- Ottimale in presenza di radici adiacenti con spazi limitati

LIVELLO DIFFICOLTÀ OPERATORE

● ● ● ● ○ Alta

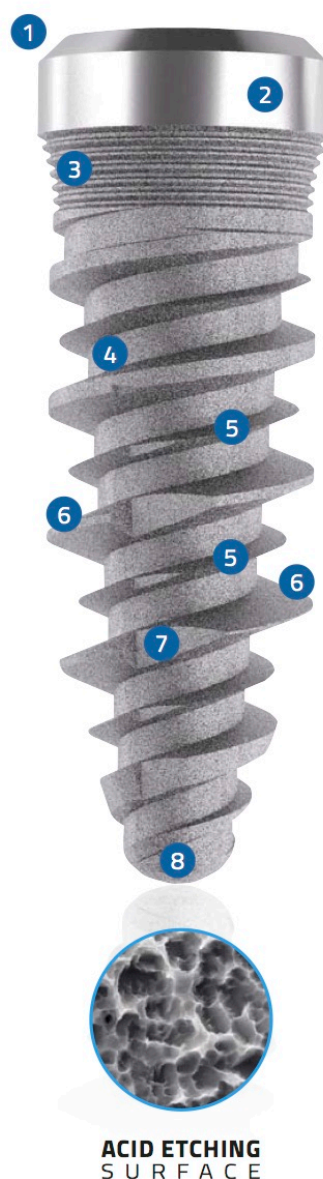


ACID ETCHING
SURFACE

TVI Plus

Impianti conici Plus esagono interno doppia spira larga transmucosi

Misure e codici

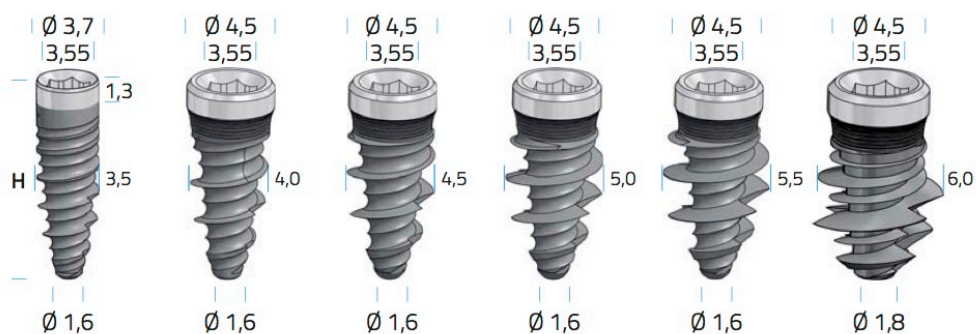

Normal


H	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0	Ø 5,5	Ø 6,0
9 mm (2 spire)	-	TVI4-2-Tr-PLUS	TVI4,5-2-Tr-PLUS	TVI5-2-Tr-PLUS	-	TVI6-2-Tr-PLUS
11 mm (3 spire)	TVI3,5-3-Tr-PLUS	TVI4-3-Tr-PLUS	TVI4,5-3-Tr-PLUS	TVI5-3-Tr-PLUS	TVI5,5-3-Tr-PLUS	-
13 mm (4 spire)	TVI3,5-4-Tr-PLUS	TVI4-4-Tr-PLUS	TVI4,5-4-Tr-PLUS	TVI5-4-Tr-PLUS	TVI5,5-4-Tr-PLUS	-
15 mm (5 spire)	TVI3,5-5-Tr-PLUS	TVI4-5-Tr-PLUS	TVI4,5-5-Tr-PLUS	TVI5-5-Tr-PLUS	TVI5,5-5-Tr-PLUS	-
17 mm (6 spire)	TVI3,5-6-Tr-PLUS	TVI4-6-Tr-PLUS	TVI4,5-6-Tr-PLUS	TVI5-6-Tr-PLUS	TVI5,5-6-Tr-PLUS	-
Platform	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal



Kit e strumenti pag. 72
Componenti protesiche pag. 97

TV_tr-PLUS h 1,2 mm

Impianti conici plus esagono esterno doppia spira larga transmucosi

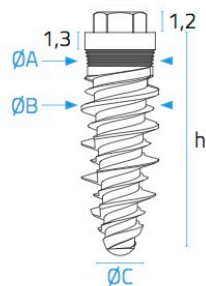

h = lunghezza
 ØA = diametro coronale max
 ØB = diametro spira max
 ØC = diametro apicale

Kit e strumenti pag. 72
 Componenti protesiche pag. 97

Platform Normal 1,2	codice	Ø impianto	h	n. spire	ØA	ØB	ØC
	TV4-3-Tr-PLUS-1,2	4,0 ■	11	3	4,1	4,0	1,6
	TV4-4-Tr-PLUS-1,2	4,0 ■	13	4	4,1	4,0	1,6
	TV4-5-Tr-PLUS-1,2	4,0 ■	15	5	4,1	4,0	1,6
	TV4-6-Tr-PLUS-1,2	4,0 ■	17	6	4,1	4,0	1,6
Platform Normal 1,2	codice	Ø impianto	h	n. spire	ØA	ØB	ØC
	TV4,5-3-Tr-PLUS-1,2	4,5 □	11	3	4,1	4,5	1,6
	TV4,5-4-Tr-PLUS-1,2	4,5 □	13	4	4,1	4,5	1,6
	TV4,5-5-Tr-PLUS-1,2	4,5 □	15	5	4,1	4,5	1,6
	TV4,5-6-Tr-PLUS-1,2	4,5 □	17	6	4,1	4,5	1,6
Platform Normal 1,2	codice	Ø impianto	h	n. spire	ØA	ØB	ØC
	TV5-3-Tr-PLUS-1,2	5,0 ■	11	3	4,1	5,0	1,6
	TV5-4-Tr-PLUS-1,2	5,0 ■	13	4	4,1	5,0	1,6
	TV5-5-Tr-PLUS-1,2	5,0 ■	15	5	4,1	5,0	1,6
	TV5-6-Tr-PLUS-1,2	5,0 ■	17	6	4,1	5,0	1,6
Platform Normal 1,2	codice	Ø impianto	h	n. spire	ØA	ØB	ØC
	TV5,5-3-Tr-PLUS-1,2	5,5 ■	11	3	4,1	5,5	1,6
	TV5,5-4-Tr-PLUS-1,2	5,5 ■	13	4	4,1	5,5	1,6
	TV5,5-5-Tr-PLUS-1,2	5,5 ■	15	5	4,1	5,5	1,6
	TV5,5-6-Tr-PLUS-1,2	5,5 ■	17	6	4,1	5,5	1,6

Protocollo chirurgico

	CMU-450	CMU-510	SF00	SF01	SF02	MTR4-3/4	MTR4-5/6	MTR4,5-3/4	MTR4,5-5/6	MTR5-3/4	MTR5-5/6	MTR5,5-3/4	MTR5,5-5/6
	Mucotomi	Fresa pilota	Frese coniche										
Ø 4,0	●		●	h 11-13	h 15-17	h 11-13	h 15-17						
Ø 4,5	●		●	h 11-13	h 15-17			h 11-13	h 15-17				
Ø 5,0		●	●	h 11-13	h 15-17					h 11-13	h 15-17		
Ø 5,5		●	●	h 11-13	h 15-17							h 11-13	h 15-17
Per osso D1/D2													
Ø 4,0	●		●	h 11-13	h 15-17								
Ø 4,5	●		●	h 11-13	h 15-17								
Ø 5,0		●	●	h 11-13	h 15-17								
Ø 5,5		●	●	h 11-13	h 15-17								
Per osso D3/D4													
Ø 4,0	●		●	h 11-13	h 15-17								
Ø 4,5	●		●	h 11-13	h 15-17								
Ø 5,0		●	●	h 11-13	h 15-17								
Ø 5,5		●	●	h 11-13	h 15-17								

In osso D3/D4 è previsto l'utilizzo del kit espansori come protocollo alternativo alle frese.

I protocolli sono a scopo illustrativo come esempi di massima, sarà cura dell'operatore decidere il protocollo più adeguato in base all'anatomia del paziente.