


Progressive

Impianti conici esagono interno doppia spira progressiva

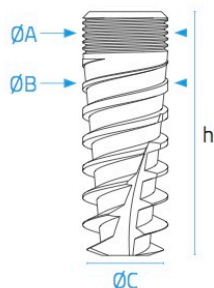

h = lunghezza
 ØA = diametro coronale max
 ØB = diametro spira max
 ØC = diametro apicale

Kit e strumenti pag. 78
 Componenti protesiche pag. 97

Platform Normal	codice	Ø impianto	h	ØA	ØB	ØC
	PROGRESSIVE 3,5-8,5	3,5	8,5	4,0	3,5	2,8
	PROGRESSIVE 3,5-10	3,5	10	4,0	3,5	2,8
	PROGRESSIVE 3,5-11,5	3,5	11,5	4,0	3,5	2,8
	PROGRESSIVE 3,5-13	3,5	13	4,0	3,5	2,8
Platform Normal	codice	Ø impianto	h	ØA	ØB	ØC
	PROGRESSIVE 4-8,5	4,0	8,5	4,0	4,0	3,3
	PROGRESSIVE 4-10	4,0	10	4,0	4,0	3,3
	PROGRESSIVE 4-11,5	4,0	11,5	4,0	4,0	3,3
	PROGRESSIVE 4-13	4,0	13	4,0	4,0	3,3
Platform Normal	codice	Ø impianto	h	ØA	ØB	ØC
	PROGRESSIVE 4,5-8,5	4,5	8,5	4,5	4,5	3,8
	PROGRESSIVE 4,5-10	4,5	10	4,5	4,5	3,8
	PROGRESSIVE 4,5-11,5	4,5	11,5	4,5	4,5	3,8
	PROGRESSIVE 4,5-13	4,5	13	4,5	4,5	3,8
Platform Normal	codice	Ø impianto	h	ØA	ØB	ØC
	PROGRESSIVE 5-8,5	5,0	8,5	5,0	5,0	4,3
	PROGRESSIVE 5-10	5,0	10	5,0	5,0	4,3
	PROGRESSIVE 5-11,5	5,0	11,5	5,0	5,0	4,3
	PROGRESSIVE 5-13	5,0	13	5,0	5,0	4,3
Platform Large	codice	Ø impianto	h	ØA	ØB	ØC
	PROGRESSIVE 6-8,5	6,0	8,5	6,0	6,0	5,7
	PROGRESSIVE 6-10	6,0	10	6,0	6,0	5,7
	PROGRESSIVE 6-11,5	6,0	11,5	6,0	6,0	5,7
	PROGRESSIVE 6-13	6,0	13	6,0	6,0	5,7

Normal

Large

Protocollo chirurgico

	CMU-450	CMU-510	SF00	SF20-stop	SF25-stop	SF29-stop	SF32-stop	SF39-stop	SF45-stop	SF50-stop
	Mucotomi		Fresa pilota		Frese con stop di profondità - h 8,5-10-11,5-13-14,5					
Ø 3,5	•		•	•	•	•*	•			
Ø 4,0	•		•	•	•	•	•*	•		
Ø 4,5	•		•	•	•	•	•	•*	•	
Ø 5,0		•	•	•	•	•	•	•	•	
Ø 6,0		•	•	•	•	•	•	•	•	•

Per osso D3/D4

*Gli impianti Progressive possono essere posizionati con una fresa intermedia nell'osso D4, ottenendo una stabilità primaria ottimale.

I protocolli sono a scopo illustrativo come esempi di massima, sarà cura dell'operatore decidere il protocollo più adeguato in base all'anatomia del paziente.