


TI

Impianti cilindrici esagono interno

Impianti con $\varnothing 3,3$ Tiaz

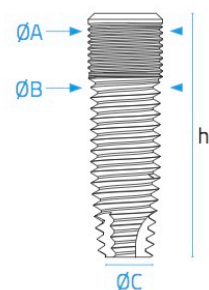

h = lunghezza
 $\varnothing A$ = diametro coronale max
 $\varnothing B$ = diametro spira max
 $\varnothing C$ = diametro apicale


Platform Tiz/Tiaz

codice	$\varnothing$ impianto	h	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$
TIAZ-8,5	3,3 $\square$ (collo 3,5 mm)	8,5	3,5	3,3	2,55
TIAZ-10	3,3 $\square$ (collo 3,5 mm)	10	3,5	3,3	2,55
TIAZ-11,5	3,3 $\square$ (collo 3,5 mm)	11,5	3,5	3,3	2,55
TIAZ-13	3,3 $\square$ (collo 3,5 mm)	13	3,5	3,3	2,55
TIAZ-14,5	3,3 $\square$ (collo 3,5 mm)	14,5	3,5	3,3	2,55

Platform Normal

codice	$\varnothing$ impianto	h	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$
TIA-8,5	3,3 $\square$ (collo 4,0 mm)	8,5	4,0	3,3	2,55
TIA-10	3,3 $\square$ (collo 4,0 mm)	10	4,0	3,3	2,55
TIA-11,5	3,3 $\square$ (collo 4,0 mm)	11,5	4,0	3,3	2,55
TIA-13	3,3 $\square$ (collo 4,0 mm)	13	4,0	3,3	2,55
TIA-14,5	3,3 $\square$ (collo 4,0 mm)	14,5	4,0	3,3	2,55

Impianti con $\varnothing 3,3$ e $\varnothing 3,75$ mm

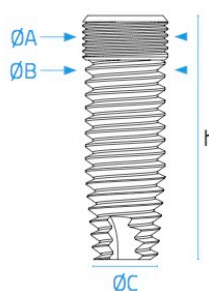

h = lunghezza
 $\varnothing A$ = diametro coronale max
 $\varnothing B$ = diametro spira max
 $\varnothing C$ = diametro apicale


Platform Normal

codice	$\varnothing$ impianto	h	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$
TIB-8,5	3,75 $\square$	8,5	4,0	3,75	3,0
TIB-10	3,75 $\square$	10	4,0	3,75	3,0
TIB-11,5	3,75 $\square$	11,5	4,0	3,75	3,0
TIB-13	3,75 $\square$	13	4,0	3,75	3,0
TIB-14,5	3,75 $\square$	14,5	4,0	3,75	3,0

Platform Normal

codice	$\varnothing$ impianto	h	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$
TID-8,5	4,25 $\square$	8,5	4,25	4,25	3,5
TID-10	4,25 $\square$	10	4,25	4,25	3,5
TID-11,5	4,25 $\square$	11,5	4,25	4,25	3,5
TID-13	4,25 $\square$	13	4,25	4,25	3,5
TID-14,5	4,25 $\square$	14,5	4,25	4,25	3,5

Impianti con $\varnothing 4,25$ $\varnothing 5,0$ $\varnothing 5,5$ mm

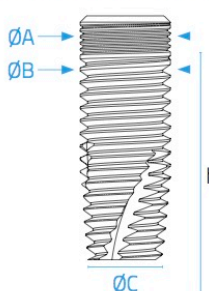

h = lunghezza
 $\varnothing A$ = diametro coronale max
 $\varnothing B$ = diametro spira max
 $\varnothing C$ = diametro apicale

Platform Normal

codice	$\varnothing$ impianto	h	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$
TIC-8,5	5,0 $\square$	8,5	5,0	5,0	4,25
TIC-10	5,0 $\square$	10	5,0	5,0	4,25
TIC-11,5	5,0 $\square$	11,5	5,0	5,0	4,25
TIC-13	5,0 $\square$	13	5,0	5,0	4,25
TIC-14,5	5,0 $\square$	14,5	5,0	5,0	4,25

Platform Normal


codice	$\varnothing$ impianto	h	$\varnothing A$	$\varnothing B$	$\varnothing C$
TIF-8,5	5,5 $\square$	8,5	5,0	5,5	4,75
TIF-10	5,5 $\square$	10	5,0	5,5	4,75
TIF-11,5	5,5 $\square$	11,5	5,0	5,5	4,75
TIF-13	5,5 $\square$	13	5,0	5,5	4,75
TIF-14,5	5,5 $\square$	14,5	5,0	5,5	4,75

Kit e strumenti pag. 78
 Componenti protesiche pag. 97

TE

Impianti cilindrici esagono esterno

Impianti con $\varnothing$ 3,3 $\varnothing$ 3,75 $\varnothing$ 4,25 mm

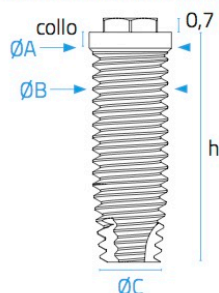

h = lunghezza
 $\varnothing$ A = diametro coronale max
 $\varnothing$ B = diametro spira max
 $\varnothing$ C = diametro apicale

Kit e strumenti pag. 78

Componenti protesiche
 Platform Normal 0,7
 da pag. 118 a pag. 120

Disponibile su richiesta impianti
 $\varnothing$ 5,0-5,5 con h 8,5-10-11,5
 13-14,5 mm e componentistica
 dedicata.

Platform Normal 0,7

codice	$\varnothing$ impianto	h	collo	$\varnothing$ A	$\varnothing$ B	$\varnothing$ C
TEA-8,5	3,3 ☐	8,5	0,8	4,1	3,3	2,55
TEA-10	3,3 ☐	10	0,8	4,1	3,3	2,55
TEA-11,5	3,3 ☐	11,5	0,8	4,1	3,3	2,55
TEA-13	3,3 ☐	13	0,8	4,1	3,3	2,55
TEA-14,5	3,3 ☐	14,5	0,8	4,1	3,3	2,55

Platform Normal 0,7

codice	$\varnothing$ impianto	h	collo	$\varnothing$ A	$\varnothing$ B	$\varnothing$ C
TEB-8,5	3,75 ☐	8,5	0,8	4,1	3,75	3,0
TEB-10	3,75 ☐	10	0,8	4,1	3,75	3,0
TEB-11,5	3,75 ☐	11,5	0,8	4,1	3,75	3,0
TEB-13	3,75 ☐	13	0,8	4,1	3,75	3,0
TEB-14,5	3,75 ☐	14,5	0,8	4,1	3,75	3,0
TEB-16	3,75 ☐	16	0,8	4,1	3,75	3,0
TEB-18	3,75 ☐	18	0,8	4,1	3,75	3,0

Platform Normal 0,7

codice	$\varnothing$ impianto	h	collo	$\varnothing$ A	$\varnothing$ B	$\varnothing$ C
TED-8,5	4,25 ☐	8,5	1,3	4,1	4,25	3,5
TED-10	4,25 ☐	10	1,3	4,1	4,25	3,5
TED-11,5	4,25 ☐	11,5	1,3	4,1	4,25	3,5
TED-13	4,25 ☐	13	1,3	4,1	4,25	3,5
TED-14,5	4,25 ☐	14,5	1,3	4,1	4,25	3,5

Protocollo chirurgico per impianti TI e TE

	CMU-450	CMU-510	SF00	SF20 stop	SF25 stop	SF29 stop	SF32 stop	SF51	SF39 stop	SF45 stop	SF50 stop	TBA	TBB	TBD	TBC	TIE
	Mucotomi		Fresa pilota	Frese con stop di profondità h 8,5-10-11,5-13-14,5				Fresa preparatrice	Frese con stop di profondità h 8,5-10-11,5-13-14,5			Maschiatori				
$\varnothing$ 3,3 (3,5)	•		•	•	•	•	•	•				•				
$\varnothing$ 3,3 (4,0)	•		•	•	•	•	•	•				•				
$\varnothing$ 3,75	•		•	•	•	•	•	•					•			
$\varnothing$ 4,25	•		•	•	•	•	•	•	•					•		
$\varnothing$ 5,0		•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	
$\varnothing$ 5,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•
Per osso D1/D2																
$\varnothing$ 3,3 (3,5)	•		•	•	•	•	•	•								
$\varnothing$ 3,3 (4,0)	•		•	•	•	•	•	•								
$\varnothing$ 3,75	•		•	•	•	•	•	•								
$\varnothing$ 4,25	•		•	•	•	•	•	•	•							
$\varnothing$ 5,0		•	•	•	•	•	•	•	•	•						
$\varnothing$ 5,5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Per osso D3/D4																

I protocolli sono a scopo illustrativo come esempi di massima, sarà cura dell'operatore decidere il protocollo più adeguato in base all'anatomia del paziente.