


Mini impianti a sfera per protesi overdenture

TZ_EP di forma conica con sfera micro $\varnothing$ 1,8 mm per ingombri protesici ridotti ideale in osso mandibolare.


TZP con sfera $\varnothing$ 2,2 mm morfologia cilindrica e diametro endosseo di 2,5 mm convertibile da sferico a monolitico. Sfere rivestite con trattamento TiN.

Impianti monofasici mini e conici

L'impianto monofasico è molto versatile, può essere utilizzato in tutte le aree della bocca per più elementi e anche per elementi circolari completi. Il colletto transmucoso funge da sigillo della cavità implantare e nella parte superiore da piatto d'appoggio per la protesi. Il generoso moncone rende l'impianto semplice da parallelizzare anche nei casi di inclinazioni particolarmente accentuate.

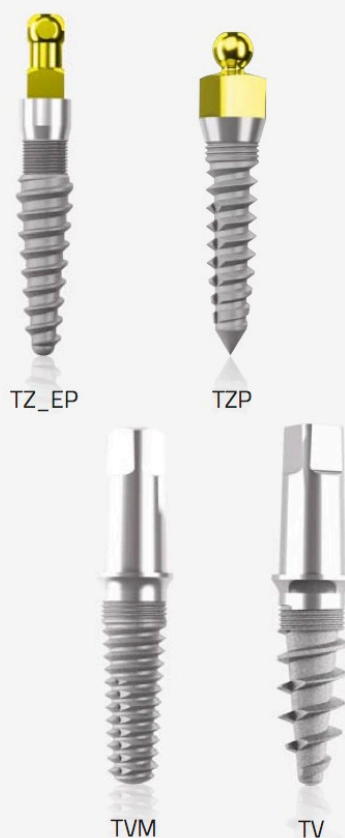

TZ_EP Overdenture impianti a vite tempo unico con sfera $\varnothing$ 1,8 mm

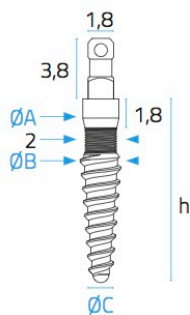

h = lunghezza
 $\varnothing$ A = diametro coronale max
 $\varnothing$ B = diametro a spira
 $\varnothing$ C = diametro apicale

codice	$\varnothing$ impianto	h	$\varnothing$ A	$\varnothing$ B	$\varnothing$ C
TZ-EP-11	2,5	11,5	2,25	2,6	1,4
TZ-EP-13	2,5	13	2,25	2,6	1,4

Componentistica $\varnothing$ 1,8 mm per TZ_EP

3,8 2,5 041CAM*	3,4 2,3 060CRM AY*	040CRM SN	040CRM	044CAIM	044PPM
Contenitore	Teflon rosa	Teflon giallo	Teflon bianco trasparente	Transfer da impronta	Perni analoghi micro
Cappetta in acciaio portateflon	800 gr (soft)	450 gr (extra soft)	1100 gr (standard)		

* Cappette incluse in ogni impianto

Protocollo chirurgico


Kit e strumenti pag. 90

I protocolli sono a scopo illustrativo come esempi di massima, sarà cura dell'operatore decidere il protocollo più adeguato in base all'anatomia del paziente.

SD-03 Mucotomo manuale	SF00 Fresa pilota	DCD-EP Avvitatore impianto
Per osso D1/D2		

TVM

Impianti monofasici spira media

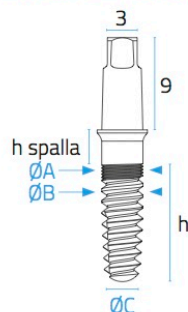

h = lunghezza
 ØA = diametro coronale max
 ØB = diametro a spira max
 ØC = diametro apicale



RUNC
 Cappetta di trasferimento
 inclusa in ogni impianto

Kit e strumenti pag. 72

codice	Ø impianto	h	h spalla	ØA	ØB	ØC
TVM3,5-10-SP1,5	3,5	10	1,5	3,5	3,5	2,2
TVM3,5-10-SP3	3,5	10	3,0	3,5	3,5	2,2
TVM3,5-11,5-SP1,5	3,5	11,5	1,5	3,5	3,5	2,2
TVM3,5-11,5-SP3	3,5	11,5	3,0	3,5	3,5	2,2
TVM3,5-13-SP1,5	3,5	13	1,5	3,5	3,5	2,2
TVM3,5-13-SP3	3,5	13	3,0	3,5	3,5	2,2

codice	Ø impianto	h	h spalla	ØA	ØB	ØC
TVM4,0-10-SP1,5	4,0	10	1,5	4,0	4,0	3,0
TVM4,0-10-SP3	4,0	10	3,0	4,0	4,0	3,0
TVM4,0-11,5-SP1,5	4,0	11,5	1,5	4,0	4,0	3,0
TVM4,0-11,5-SP3	4,0	11,5	3,0	4,0	4,0	3,0
TVM4,0-13-SP1,5	4,0	13	1,5	4,0	4,0	3,0
TVM4,0-13-SP3	4,0	13	3,0	4,0	4,0	3,0

codice	Ø impianto	h	h spalla	ØA	ØB	ØC
TVM4,5-10-SP1,5	4,5	10	1,5	4,5	4,5	3,2
TVM4,5-10-SP3	4,5	10	3,0	4,5	4,5	3,2
TVM4,5-11,5-SP1,5	4,5	11,5	1,5	4,5	4,5	3,2
TVM4,5-11,5-SP3	4,5	11,5	3,0	4,5	4,5	3,2
TVM4,5-13-SP1,5	4,5	13	1,5	4,5	4,5	3,2
TVM4,5-13-SP3	4,5	13	3,0	4,5	4,5	3,2

Protocollo chirurgico


	CMU-450	SF00	SF 20-stop h 10-11,5-13	SF 35 NEW h 10-11,5-13	SF 40 h 10-11,5-13	SF 45 h 10-11,5-13	SIV
	Mucotomo	Fresa pilota	Frese coniche				Connettore 3x3
Ø 3,5	•	•		•			•
Ø 4,0	•	•		•	•		•
Ø 4,5	•	•		•	•	•	•
Per osso D1/D2							
Ø 3,5	•	•	•*	•	•		
Ø 4,0	•	•		•*	•		
Ø 4,5	•	•			•*	•	
Per osso D3/D4							

*Gli impianti possono essere posizionati con una fresa intermedia nell'osso D4, ottenendo una stabilità primaria ottimale. La spalla transmucosa di 1,5 o 3 mm viene utilizzata a contatto con la gengiva.

I protocolli sono a scopo illustrativo come esempi di massima, sarà cura dell'operatore decidere il protocollo più adeguato in base all'anatomia del paziente.

TV

Impianti monofasici spira larga

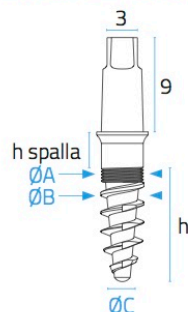

h = lunghezza
 ØA = diametro coronale max
 ØB = diametro a spira max
 ØC = diametro apicale



RUNC
 Cappetta di trasferimento
 inclusa in ogni impianto

Kit e strumenti pag. 72

codice	Ø impianto	h	h spalla	n. spire	ØA	ØB	ØC
TV3,5-3-SP1,5	3,5	11	1,5	3	3,5	3,5	2,0
TV3,5-3-SP3	3,5	11	3,0	3	3,5	3,5	2,0
TV3,5-4-SP1,5	3,5	13	1,5	4	3,5	3,5	2,0
TV3,5-4-SP3	3,5	13	3,0	4	3,5	3,5	2,0
TV3,5-5-SP1,5	3,5	15	1,5	5	3,5	3,5	2,0
TV3,5-5-SP3	3,5	15	3,0	5	3,5	3,5	2,0

codice	Ø impianto	h	h spalla	n. spire	ØA	ØB	ØC
TV4-3-SP1,5	4,0	11	1,5	3	3,5	4,0	2,2
TV4-3-SP3	4,0	11	3,0	3	3,5	4,0	2,2
TV4-4-SP1,5	4,0	13	1,5	4	3,5	4,0	2,2
TV4-4-SP3	4,0	13	3,0	4	3,5	4,0	2,2
TV4-5-SP1,5	4,0	15	1,5	5	3,5	4,0	2,2
TV4-5-SP3	4,0	15	3,0	5	3,5	4,0	2,2

codice	Ø impianto	h	h spalla	n. spire	ØA	ØB	ØC
TV4,5-3-SP1,5	4,5	11	1,5	3	3,5	4,5	2,4
TV4,5-3-SP3	4,5	11	3,0	3	3,5	4,5	2,4
TV4,5-4-SP1,5	4,5	13	1,5	4	3,5	4,5	2,4
TV4,5-4-SP3	4,5	13	3,0	4	3,5	4,5	2,4
TV4,5-5-SP1,5	4,5	15	1,5	5	3,5	4,5	2,4
TV4,5-5-SP3	4,5	15	3,0	5	3,5	4,5	2,4

codice	Ø impianto	h	h spalla	n. spire	ØA	ØB	ØC
TV5-3-SP1,5	5,0	11	1,5	3	3,5	5,0	2,6
TV5-3-SP3	5,0	11	3,0	3	3,5	5,0	2,6
TV5-4-SP1,5	5,0	13	1,5	4	3,5	5,0	2,6
TV5-4-SP3	5,0	13	3,0	4	3,5	5,0	2,6
TV5-5-SP1,5	5,0	15	1,5	5	3,5	5,0	2,6
TV5-5-SP3	5,0	15	3,0	5	3,5	5,0	2,6

Protocollo chirurgico

	CMU-450	CMU-510	SF00	SF25-stop h 10-11,5-13-14,5	SF01 h 11-13	SF02 h 15	SIV
	Mucotomi		Fresa pilota	Frese coniche			Connettore 3x3
Ø 3,5	•		•	•			•
Ø 4,0	•		•		h 11-13	h 15	•
Ø 4,5	•		•		h 11-13	h 15	•
Ø 5,0		•	•		h 11-13	h 15	•

Per osso D3/D4

I protocolli sono a scopo illustrativo come esempi di massima, sarà cura dell'operatore decidere il protocollo più adeguato in base all'anatomia del paziente.